Spis treści

1. Komunikacja z symulatorem Laparo		nunika	acja z symulatorem Laparo	2
	1.1.	Kom	nendy wysyłane do symulatora	2
	1.2.	Sum	a kontrolna	2
	1.3.	Iden	tyfikatory komend	2
	1.4.	Iden	tyfikatory komend o niepotwierdzonym działaniu	2
	1.5.	Ping	owanie urządzenia	3
	1.6.	Dan	e wysyłane przez symulator	3
	1.6.	1.	Ramka wysyłana przez urządzenie ma następującą postać:	3
	1.6.	2.	Bajt nr 3 może mieć następujące wartości:	3
	1.6.	3.	Postać danych	4
2.	Bibl	ioteka	a służąca do komunikacji z symulatorem Laparo	4
	2.1.	Wyn	nagania uruchomienia	4
	2.2.	Inte	rfejs publiczny	5
	2.2.	1.	Interejs ILaparoComunnicator	5
	2.2.	2.	Klasa CommunicatorFactory	5
	2.2.	3.	Używanie plików w zastępstwie urządzenia	5
	2.2.	4.	Klasy- modele danych	6
	2.2.	5.	Klasa LaparoCommunicatorImpl	6
	2.2.	6.	Klasa IntrernalData	7
	2.2.	7.	Klasa OutCommand	7
3. Dostarczony progr		tarcz	ony program LaparoTester	8
4.	Pro	gram	LaparoTester2	8
4.1. Schemat blokowy działania programu				

1. Komunikacja z symulatorem Laparo

Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą danych wysyłanych po interfejsie USB. Mikroprocesor zamontowany w urządzeniu zarówno interpretuje dane przychodzące, jak i wysyła własne.

1.1. Komendy wysyłane do symulatora


Urządzenie potrafi interpretować szereg komend. Muszą one zostać wysłane w postaci 8 bajtów, dokładna struktura ma postać:

- 1. Bajt 0x43, będący częścią protokołu, konsekwencje jego braku nie są jeszcze znane
- 2. Bajt 0x4D, będący częścią protokołu, konsekwencje jego braku nie są jeszcze znane
- 3. Bajt stanowiący identyfikator konkretnej komendy
- 4. Cztery bajty stanowiące parametry komendy, w przypadku ich braku zera
- 5. Bajt stanowiący sumę kontrolną, będący częścią protokołu, obecnie wygląda, że jego brak nie powoduje błędów

1.2. Suma kontrolna

Każda komenda wysłana do urządzenia musi być zakończona bajtem z obliczoną sumą kontrolną. Jest ona liczona jako wynik dodania wszystkich pozostałych bajtów w komendzie (bajty 0 do 6). Obecnie nie wiadomo, co dzieje się w przypadku wartości większej niż 255, która nie zmieści się na jednym bajcie.

Poniżej znajduje się graficzne przedstawienie komendy

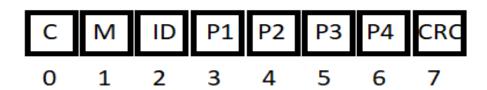

1.3. Identyfikatory komend

- 1. Bajt 0x50 reprezentuje komendę odpowiedzialną za pingowanie, nie przyjmuje żadnych parametrów
- 2. Bajt 0x53 reprezentuje komendę odpowiedzialną za rozpoczęcie nadawania danych przez urządzenie, nie przyjmuje żadnych parametrów
- 1.4. Identyfikatory komend o niepotwierdzonym działaniu
 - 1. Bajt 0x54 reprezentuje komendę nazwaną OUT SET TOOL TYPE

- 2. Bajt 0x49 reprezentuje komendę nazwaną OUT SET STATE IDLE
- 3. Bajt 0x42 reprezentuje komendę nazwaną OUT SET STATE BOOTLOADER
- 4. Bajt 0x4D reprezentuje komendę nazwaną OUT_SET_STATE_MEMS_CALIB
- 5. Bajt 0x43 reprezentuje komendę nazwaną OUT_SET_STATE_PROX_CALIB

1.5. Pingowanie urządzenia

Po zainicjowaniu komunikacji z urządzeniem, aby ją utrzymać, należy wysyłać komendy 0x50. Jeżeli urządzenie nie otrzyma komendy 0x50 w czasie 1 s od ostatniej komendy 0x53 lub 0x50, zamknie swój koniec kanału komunikacyjnego.

1.6. Dane wysyłane przez symulator

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, urządzenie wysyła wszystkie dane z czujników w równych odstępach czasu równych 10 ms. Dane mają postać ciągu bajtów zakończonego sumą kontrolną. Program testowy dowodzi jednak, że dane wysyłane są rzadziej - mniej więcej co 30ms. Ponadto w ramach jednego komunikatu wysyłanych jest wiele danych.

1.6.1. Ramka wysyłana przez urządzenie ma następującą postać:

- Bajt 0x43
- Bajt 0x4D
- Bajt symbolizujący charakter wysłanych danych (patrz dalej)
- Bajty składające się na konkretne dane, ich ilość jest zależna od poprzedniego bajtu
- Suma kontrolna

1.6.2. Bajt nr 3 może mieć następujące wartości:

- 0x00 brak komendy
- 0x52 dostarczone dane dotyczą położenia końcówki jednego ze szczypiec
- 0x4D w dostarczonym kodzie źródłowym oznaczone jako "IN_RESULTS_CAM"
- 0x41 dostarczone dane dotyczą przyśpieszenia
- 0x56 dostarczone dane dotyczą prędkości
- 0x4F w dostarczonym kodzie źródłowym oznaczone jako "IN_RESULTS_OSC"
- 0x44 dostarczone dane dotyczą odległości
- 0x53 w dostarczonym kodzie źródłowym oznaczone jako "IN RESULTS CLAMPS S"
- 0x43 w dostarczonym kodzie źródłowym oznaczone jako "IN RESULTS CLAMPS"
- 0x49 w dostarczonym kodzie źródłowym oznaczone jako "IN RESULTS INFO"

1.6.3. Postać danych

W przypadku danych o położeniu (bajt 0x52) - dane te mają postać:

- Bajt wskazujący, którego ze szczypiec dotyczą dane, ma możliwe wartości: 0x4C lewy szczypiec, 0x52 - prawy szczypiec, 0x41 - w dostarczonym kodzie źródłowym oznaczony jako "SIDE_ASSIST"
- 4 bajty symbolizujące głębokość końcówki szczypca
- 16 bajtów reprezentujące 4-liczbowy kwaternion oznaczający położenie końcówki
- 4 bajty reprezentujące rotację końcówki
- 4 bajty reprezentujące kąt pod jakim znajduje się końcówka

W przypadku danych symbolizowanych przez A, V, D, S, C lub O, dane mają postać:

- Bajt, którego znaczenia nie udało się poznać ze statycznej analizy dostarczonego kodu źródłowego
- 4 bajty reprezentujące konkretne dane

W wszystkich powyższych przypadkach zestawy 4 bajtów należy odczytywać jako liczbę zmiennoprzecinkową pojedynczej precyzji.

2. Biblioteka służąca do komunikacji z symulatorem Laparo

Biblioteka udostępniona jest za pomocą pliku .dll, który należy dodać do swojej aplikacji jako referencję.

Biblioteka odpowiada za całość komunikacji z urządzeniem, udostępniając użytkownikowi interfejs umożliwiający pobieranie danych z symulatora oraz testowanie aplikacji w przypadku braku dostępu do urządzenia.

2.1. Wymagania uruchomienia

W trybie korzystania z symulatora, biblioteka wymaga, aby w folderze jej uruchomienia znajdował się plik 'portName.txt', w którym zapisana ma być nazwa portu, do którego podłączony jest symulator.

Takie rozwiązanie, zostało wybrane ze względu na nieobecność biblioteki systemowej System. Managment w oprogramowaniu Unity.

2.2. Interfejs publiczny

Biblioteka udostępnia interfejs ILaparoComunnicator, która odpowiada za całość komunikacji z urządzeniem. Ponadto dostępne są również klasy będące modelami danych.

2.2.1. Intereis ILaparoComunnicator

Stanowi interfejs pomiędzy użytkownikiem biblioteki, a symulatorem.

2.2.1.1. Implementowane interfejsy:

IDisposable(): umożliwia używanie interfejsu w blokach using

2.2.1.2. Publiczne metody

- GetDataInEuler(): EulerData zwraca najnowsze dane z urządzenia w formie kątów Eulera
- GetDataInQuaternion(): QuaternionData zwraca najnowsze dane z urządzenia w formie kwaternionu

2.2.2. Klasa CommunicatorFactory

Klasa służąca do otrzymywania odpowiedniej implementacji interfejsu ILaparoCommunicator.

2.2.2.1. Publiczne metody statyczne:

- GetMock(string path) tworzy implementację, która będzie pobierać dane ze wcześniej przygotowanego pliku.
- GetCommunicator tworzy implementację komunikującą się z symulatorem.

2.2.3. Używanie plików w zastępstwie urządzenia

Klasa CommunicatorFactory umożliwia stworzenie implementacji interfejsu ILaparoCommunicator, która czyta dane z plików przez co umożliwia tworzenie i testowanie aplikacji bez dostępu do symulatora.

Metodzie GetMock należy przekaż ścieżkę do folderu, który zawiera trzy pliki:

- cartesian.tsv
- euler.tsv
- quaternion.tsv

Odczytywane będą tylko pliki w formacie .tsv. Pojedyncze liczby zmiennoprzecinkowe oddzielone są od siebie za pomocą znaku '/t'. Linie naprzemiennie odczytywane są jako dane z lewej i prawej końcówki.

Pozycja ostatniej wczytanej linii jest wspólna, więc po wczytaniu dwóch linijek z danych kartezjańskich, czytanie danych w kwaternionach rozpocznie się od linii nr 3. Dane będą czytane w pętli zapewniając niezależność od długości pliku. Ponadto klasa wczytuje wszystkie dane podczas tworzenia obiektu, więc zmiany w pliku nie będą od razu widoczne w programie.

2.2.4. Klasy- modele danych

2.2.4.1. Klasa EulerData

Reprezentuje położenia końcówek obu szczypiec za pomocą kątów Eulera.

2.2.4.1.1. Publiczne właściwości:

- LeftAngles : double[] tablica kątów alfa, beta, gamma lewej końcówki
- RightAngles : double[] tablica katów alfa, beta, gamma prawej końcówki

2.2.4.2. Klasa QuaternionData

Reprezentuje położenia końcówek obu szczypiec za kwaternionów.

2.2.4.2.1. Publiczne właściwości

- LeftQuaternion : double[] kwaternion reprezentujący położenie lewej końcówki
- RightQuaternion : double[] kwaternion reprezentujący położenie prawej końcówki

Wszystkie powyższe klasy przeciążają metodę ToString(), aby zapewnić łatwe wypisanie danych.

2.2.5. Klasa LaparoCommunicatorImpl

Klasa wyszukuje urządzenie Laparo wśród portów seryjnych komputera, inicjalizuje komunikację z nim, a następnie tworzy dwa wątki, z których jeden zajmuje się pingowaniem urządzenia, a drugi odczytywaniem danych przez nie wysłanych.

2.2.5.1. Implementowane interfejsy ILaparoCommunicator

2.2.5.2. Pola prywatne

- port : System.IO.SerialPort służy do komunikacji z urządzeniem
- pingerThread : System.Threading.Thread reprezentuje wątek odpowiedzialny za pingowanie urządzenia
- receiverThread : System.Thread.Thread reprezentuje wątek odpowiedzialny za odczytywanie danych otrzymanych od urządzenia

2.2.5.3. Metody publiczne:

- Dispose() funkcja interfejsu IDisposable, zatrzymuje oba wątki stworzone podczas inicjalizacji
- GetCartesianData(): CartesianData zwraca odpowiednio wypełnione dane dla prawej i lewej końcówki w postaci współrzędnych kartezjańskich
- GetEulerData(): EulerData zwraca odpowiednio wypełnione dane dla prawej i lewej końcówki w postaci kątów Eulera
- GetQuaterionData : QuaterionData zwraca odpowiednio wypełnione dane dla prawej i lewej końcówki w postaci kwaternionu

2.2.5.4. Metody prywatne

- SetPort() szuka pliku "portName.txt" w folderze, z którego biblioteka została uruchomiona, a następnie próbuje odczytać z niego nazwę portu do otwarcia. Rzuca IOException, jeżeli nie znajdzie urządzenia lub pliku.
- PingDevice() w nieskończonej pętli wysyła komendę PING do urządzenia i usypia wątek na 1s
- ReceiveData() w nieskończonej pętli odczytuje wszystkie bajty z pola port, wypisuje je na konsolę i usypia wątek na 10ms
- SendCommand(OutCommand command) tworzy tablicę 8 bajtów z podanego obiektu komendy, uzyskuje blokadę na pole port i wysyła dane
- InitializeThreads() inicjalizuje pole pingerThread wątkiem wykonującym metodę PingDevice() oraz pole receiverThread wątkiem wykonującym metodę ReceiveData()

2.2.6. Klasa IntrernalData

Klasa jest odpowiedzialna za interpretację danych otrzymanych od symulatora.

2.2.6.1. Klasa wewnętrzna: Data

Jest odpowiedzialna za przechowywanie danych otrzymanych od symulatora o konkretnej końcówce. Posiada pola reprezentujące odległość, oscylację, prędkość i przyspieszenie oraz kwaternion i kąty Eulera, które wysyła symulator.

2.2.6.2. Metody publiczne:

- ProccessData(byte[] bytes) : intepretuje otrzymaną tablice bajtów na podstawie znanego schematu ramki danych. Wypełnia odpowie pola klasy Data.
- GetQuad(Side s): zwraca tablicę liczb zmiennoprzecinkowych, które reprezentują kwaternion mówiący o położeniu danej końcówki.
- GetAngles(Side s): zwraca tablicę liczb zmiennoprzecinkowych, które reprezentują kąty Eulera konkretnej końcówki.

2.2.7. Klasa OutCommand

Reprezentuje komendę wysyłaną do urządzenia. Obecnie nie umożliwia podawania parametrów komendy.

2.2.7.1. Publiczne konstruktory

 OutCommand(OutCommandId ID) - inicjalizuje pole id argumentem ID oraz wywołuje metodę CalculateCrc()

2.2.7.2. Prywatne pola

- Id : byte reprezentuje id komendy
- crc : byte reprezentuje sume kontrolna komendy

2.2.7.3. Prywatne metody

- CalculateCrc() oblicza sumę kontrolną komendy i ustawia na nią pole crc
- 2.2.7.4. Typ wyliczeniowy OutCommandId

Typ wyliczeniowy typu byte reprezentuje id komendy.

- 2.2.7.4.1. Publiczne pola:
 - o PING wartość 0x50
 - o SET_STATE_SENDING wartość 0x53

3. Dostarczony program LaparoTester

Program ten korzysta z biblioteki LaproCommunicator, aby pokazać jej działanie w przypadku korzystania z gotowego zestawu danych.

Uruchomienie programu wymaga skopiowania dostarczonego folderu "data" do lokalizacji "C:/". Program po uruchomieniu wyświetli dane ze wszystkich plików w folderze "data" (niemożliwe jest rozróżnienie formatu danych).

4. Program LaparoTester2

Uwaga: obecnie wykonanie programu jest powstrzymane przez wyjątek podczas parsowania danych otrzymanych od symulatora.

Uwaga: program wymaga uprawnień administratora! W przypadku debugowania, środowisko programistyczny musi zostać uruchomione jako administrator.

Po uruchomieniu programu pojawia się konsola. W przypadku braku urządzenia wypisany zostanie odpowiedni komunikat.

W przypadku odnalezienia podłączonego symulatora, program zaczyna czytać dane otrzymane od niego. Dane nie są wypisywane, ale sposób jego działania można zobaczyć czytając plik "C;/laparo logs.txt". Próba pobrania danych jest wykonywana co 10ms.

Program wstrzymuje swoje działanie po krótkim czasie (około minuty).

4.1. Schemat blokowy działania programu

